

DIFERENCIAIS Differentials Diferenciales



TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO PELO SISTEMA CAD/CAM
Production technology by CAD/CAM system
Tecnología de producción por sistema CAD/CAM



PARES SIMÉTRICOS
Symmetrical pairs
Lados simétricos



PADRÃO DE QUALIDADE CONSTANTE
Constant quality standard
Estándar de calidad constante




ADITIVO ORGÂNICO - ODT
ORGANIC ADDITIVE - ODT
ADITIVO ORGÂNICO - ODT
Aumenta a resistência ao desgaste e impacto.
Increases wear and impact resistance.
Aumenta la resistencia al desgaste e al impacto.



RETENÇÃO
RETENTION
RETENCIÓN
Modelos com exclusiva cavidade, aumentando a adesão à base da prótese.
Exclusive cavity models, increasing adhesion to the denture base.
Modelos con exclusiva cavidad, aumentando la adherencia a la base de la dentadura.



ESTÉTICA
ESTHETIC
ESTHÉTICA
Superfície texturizada, mamelos evidenciados e anatomia que trazem um resultado estético e natural aos dentes.
Textured surface, evidenced mamelons and anatomy that bring an aesthetic and natural result to the teeth.
Superficie texturizada, mamelones evidenciados e anatomía que aportan un resultado estético y natural a los dientes.

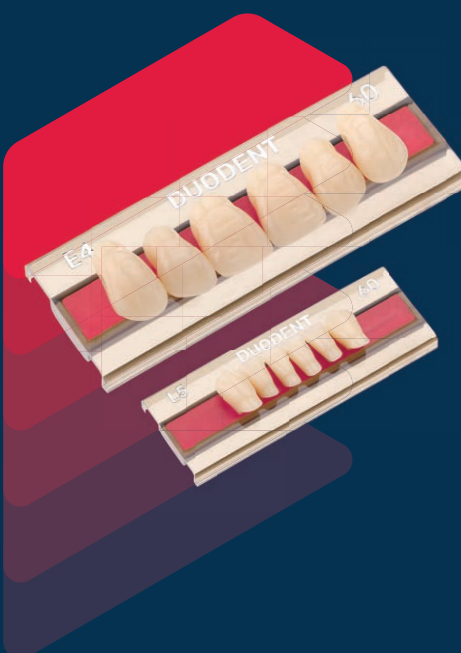

Beleza Duradoura

Alta resistência e a durabilidade que proporcionam **resultados estéticos naturais de longa duração.**

Lasting Beauty

High strength and durability that provide long-lasting natural aesthetic results.


Belleza duradera

Alta resistencia y durabilidad que proporcionan resultados estéticos naturales duraderos.

DUODENT

POSTERIORES, SUPERIORES E INFERIORES *Upper and lower posteriors*

		M2 (L5) 29,5 (L6) 8,9 (L7) 31,9 (L8) 7,8
		M3 (L5) 29,1 (L6) 9,0 (L7) 31,4 (L8) 8,2
		M4 (L5) 31,0 (L6) 9,3 (L7) 34,2 (L8) 9,3
		M5 (L5) 30,5 (L6) 8,7 (L7) 33,4 (L8) 8,5
		M6 (L5) 33,3 (L6) 10,0 (L7) 35,7 (L8) 9,2

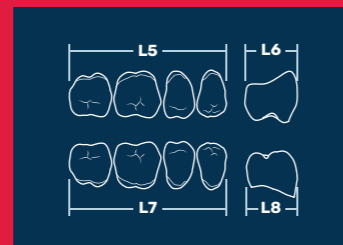

EVODEN



0800 058 8888
sac@evoden.com.br
evoden.com.br

DENTES DE RESINA ACRÍLICA PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas como ácidos ou álcalis.

Composição: Polimetilmetacrilato - Dimetacrilato - Fluorescente - Pigmentos Biocompatíveis - Aditivo Orgânico.

Armazenagem: Conservar ao abrigo e luz e calor.

Embalagem: 8 placas anteriores ou 5 placas posteriores.

ACRYLIC RESIN TEETH FOR DENTAL PROSTHESES

Follow the usual procedures for choice, waxing-up, articulation, polymerization, infection-control and maintenance of the prosthesis, as well as for individual protection.

Indications for the patient: To increase the teeth durability it is highly recommended to avoid contact with alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials during the daily hygiene.

Composition: Polymethylmethacrylate - Dimethacrylate - Fluorescent - Biocompatible Pigments - Organic Additive.

Storage: Keep protected from light and heat.

Packing Units: 8 anterior sets or 5 posterior sets.

DIENTES DE RESINA ACRÍLICA PARA PRÓTESIS DENTALES

Seguir los procedimientos usuales para selección, montaje, articulación, polimerización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis, tanto como para protección individual.

Recomendaciones al paciente: Para aumentar la duración de los dientes es recomendada una higienización diaria sin usar sustancias agresivas como ácidos o álcalis.

Composición: Polimetilmetacrilato - Dimetacrilato - Fluorescente - Pigmentos Biocompatibles - Aditivo Orgânico.

Almacenamiento: Conservar protegido de luz y calor.

Empaque: 8 placas anteriores o 5 placas posteriores.

EVODEN INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Rua Genésio de Bem, 1634, Distrito Industrial.
CEP 13.633-428, Pirassununga, São Paulo, Brasil.
CNPJ: 44.136.221/0001-67, Indústria Brasileira.
Made in Brazil. Hecho en Brasil.
Fone + 55 (19) 3565-8888.
Anvisa nº: 82426979002
Responsável Técnico:
Jéssica Augusto. CRQ IV-04270957.


EVODEN

EVODEN

Dentes acrílicos de 2 camadas.
2 Layers Acrylic teeth.
Dientes acrílicos de 2 capas.
Produto médico de uso único.
CATÁLOGO DE FORMAS
Mold chart / Carta de formas

ANTERIORES SUPERIORES

Upper Anteriors

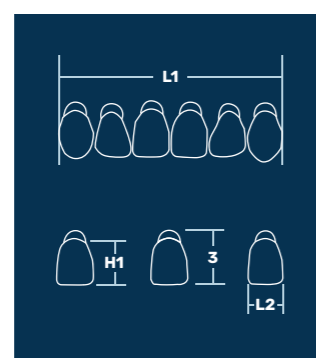

ANTERIORES SUPERIORES

Upper Anteriors

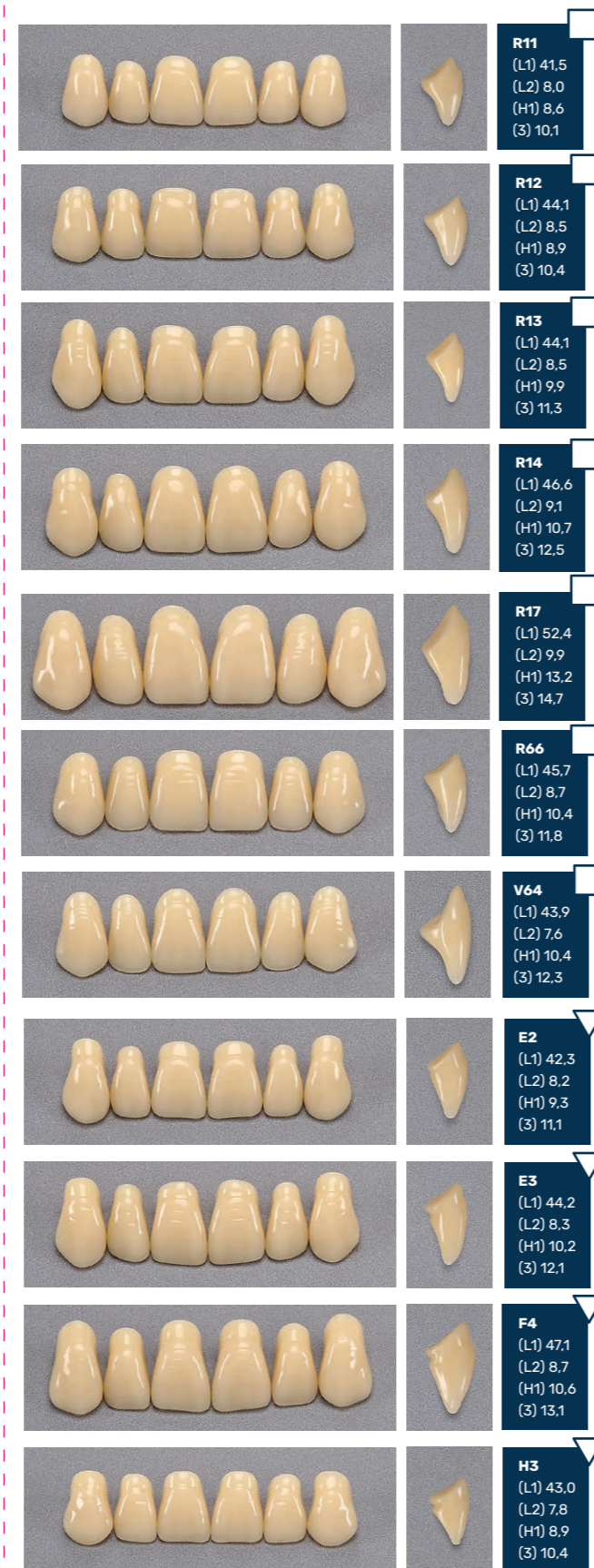


TABELA DE ARTICULAÇÃO Articulation Chart - Tabla de Articulación		
ANTERIORES		POSTERIORES
E4	L5	M4-M6
G3	K6	M4
O31	L5	M3
O32	L3	M5
O36	L7	M4
V26	L3-L10	M3-M5
L2	K6	M4
L4	K12-K10	M4-M6
R11	L1	M3
R12	L5	M3
R13	L5	M3-M5
R14	L7	M4-M6
R17	K10	M6
R66	L5	M5
V64	K6	M3-M5
E2	L5	M2
E3	K6	M4
F4	L10	M4-M6
H3	L3	M3
H4	L3	M5
T21	L3	M3
T22	L3	M3
T25	L10	M4
T44	L3	M3-M5
T4B	L5	M2
V25	L3-L5	M5
V6B	K10	M6
V2D	L3	M2
V3P	L10	M5

ESCALA DE CORES Shade guide / Guía de Colores									
60	62	66	67	69	BL2	BL3			
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B3	C2	C3	D3

ANTERIORES SUPERIORES

Upper Anteriors



FORMATO DO DENTE DE ACORDO COM O BIOTIPO
Tooth shape according to biotype
Formato del diente de acuerdo al biotipo



ANTERIORES INFERIORES

Lower Anteriors

